



המדריך לחיבור ולניתוק
ממשאבת עירוי
תרופתי בבית
צנתר היקפי

שירות לקוחות 1-800-600-700
שעות פעילות: ראשון עד חמישי: 8:00-17:00
מעבר לשעות הפעילות, בערבי חג וחגים: יש ללחוץ שלוחה 2

RemediXcare
BY SUPER-PHARM



מטופל/ת יקר/ה

Remedix Care שמחה לעמוד לרשותך ולספק משאבת עירוני חד פעמית המכילה תרופה. משאבת העירוני החד פעמית מכילה תרופה שהותאמה עבורך על פי מרשם אישי. כמות התרופה, ריכוזה, ואפילו קצב ההזלפה נקבעו ע"י הרופא המטפל. המרשם שהגיע ל-Remedix Care נבדק על ידי שני רוקחים, ועבר לייצור רוקחי בחדר נקי בתנאים מוקפדים, בהתאם להנחיות משרד הבריאות. משאבת העירוני התרופתי שקיבלת הינה חד פעמית. היא מאפשרת ניידות ושהיה בסביבת המגורים הרגילה ללא צורך באשפוז.

קבלת התרופה, הציוד ואחסונם

אישור התאמת המשלוח ופרטיו למטופל ותקינות המשלוח

1. בעת קבלת המשלוח, מוודאים כי פרטי המטופל המופיעים על תווית הקרטון ועל תעודת המשלוח תואמים לפרטיך האישיים.
2. פותחים את אריזת הקרטון מיד עם קבלתה ובודקים חיצונית את כל משאבות העירוני התרופתי. במידה וקיים חשש לפגם, יש ליצור קשר מידי עם נציג שירות הלקוחות של Remedix Care 1-800-600-700
3. מוודאים שהפרטים המופיעים בתווית המודבקת על משאבות העירוני התרופתי, תואמים לפרטיך האישיים:
 - א. מספר תעודת זהות
 - ב. שם ומשפחה
 - ג. שם התרופה
 - ד. מינון על פי מרשם רופא
 - ה. נפח על פי מרשם
 - ו. תאריך אחרון לשימוש בתרופה
4. בדיקת תפוגה: בודקים את התאריך האחרון לשימוש הרשום בתווית שעל משאבות העירוני התרופתי, על גבי מזרקי הסליין ועל גבי מזרקי ההפרין (הפרין ניתן רק אם קיימת המלצת רופא), מוודאים שהם בתוקף. אין להשתמש במשאבה אם תאריך התפוגה שלה עבר. חובה להקפיד להשתמש עפ"י תאריכי תפוגה - מתאריך התפוגה הקרוב יותר לתאריך התפוגה הרחוק יותר.

5. תנאי אחסנה:

משאבת עירוני תרופתי: שימו לב לתנאי אחסנת התרופה המופיעים על גבי התווית שעל משאבת העירוני. במידה שיש לאחסן את משאבת העירוני התרופתי בקירור, יש להוציאה בהתאם להדרכת האחות. התמיסה צריכה להגיע לשימוש כשהיא בטמפרטורת החדר. אין לחמם את התרופה במיקרוגל או בכל אמצעי חימום אחר. מזרקי הסליין, ההפרין וערכות החיבור/ניתוק מאוחסנים בטמפרטורת החדר (הרחק מהישג ידם של ילדים).

מה בארגז?



מזרק סליין



מגבוני אלכוהול חד פעמיים



סוגר/קלאמפ
פקק

משאבת עירוני תרופתי

ציוד נלווה:

הערכה מיועדת להחלפת הצנרת ולחבישתו, שיבוצעו במרפאה ע"י צוות רפואי



ערכות שבועיות



מזרקי הפרין -
(רק אם יש הנחיה רפואית)

ההכנה לחיבור למשאבת עירוני תרופתי

הציוד הדרוש לצורך התחברות

- א. משאבת עירוני תרופתי עם תרופה. במידה שהמשאבה אוחסנה בקירור - יש להוציא את משאבת העירוני, בהתאם להדרכת האחות
- ב. שני מגבוני אלכוהול חד פעמיים
- ג. מזרק סליין (NaCl 0.9%)



3.

אוחזים את פקק האל חזור באמצעות מגבון אלכוהול ומחטאים אותו עם מגבון נוסף למשך 15 שניות

2.

במידה שקיים מאריך עם סוגר, יש לפתוח את הסוגר כפי שהודרכת



1.

רוחצים ידיים במים ובסבון נוזלי ומייבשים במגבת נייר חד פעמית

חיבור משאבת עירווי תרופתי לצנתר אשר על גופך




.4



1. אוחזים את מזרק הסליין באופן אנכי - פתח כלפי התקרה.
2. דוחסים את הבוכנה כלפי מעלה.
3. מסירים את הפקק.
4. דוחסים שוב את הבוכנה כלפי מעלה ליציאת הנוזל (טיפה).

.5

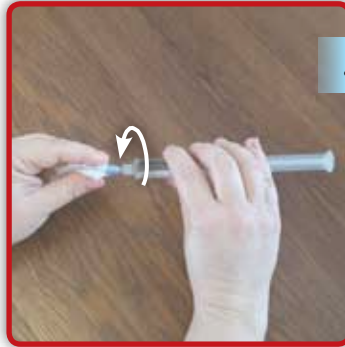

אוחזים את מזרק הסליין בגוף המזרק ומחברים אל פקק האל-חזור שבמוצא הצנתר ע"י דחיפה והברגה לכיוון צד ימין (עם כיוון השעון).
מזריקים _____ מ"ל (עפ"י המרשם הרפואי). בסיום ההזרקה מנתקים את המזרק ע"י סיבוב לכיוון צד שמאל (נגד כיוון השעון). ממשיכים לאחוז את פקק האל-חזור עם המגבון למניעת ניתוקו מהצנתר.

.6



משחררים החוצה את צינורית משאבת העירווי. לאחר מכן, פותחים את הסוגר/קלאמפ הנמצא על גבי צינורית משאבת העירווי התרופתי.

.7




מבריגים החוצה את הפקק בקצה הצינורית של משאבת העירווי התרופתי. מוודאים שהטיפה הראשונה יוצאת מהצינורית. מחברים את הצינורית לפקק האל חזור ע"י דחיפה והברגה לימין.

.8




כעת משאבת העירווי התרופתי מחוברת, ומתחילה לפעול בהתאם לקצב שנקבע ע"י הרופא. לאחר תום הזמן הקצוב למתן התרופה, בלון הגומי שבתוך משאבת העירווי יצטמק ויראה כאצבע.

.9

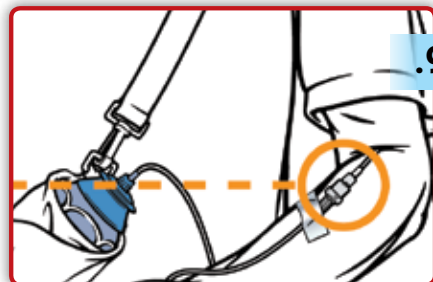

יש לשאת את המשאבה בגובה הצנתר!

.10

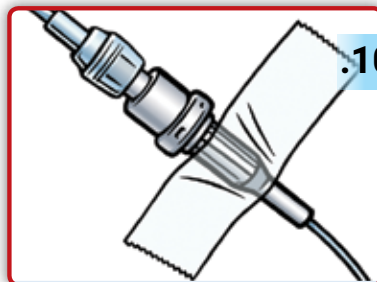

כאשר משך ההזלפה מעל 20 שעות, מדביקים לגוף את הקָּשׁ.

ניתוק משאבת העירוני התרופתי מהצנתר




הציוד הדרוש לצורך להתנתקות

- א. שני מגבוני אלכוהול חד פעמיים
- ב. מזרק סליין (NaCl 0.9%)
- ג. מזרק הפרין (רק אם יש הנחיית רופא)



.3

ממשיכים לאחוז את פקק האל חזור ומחטאים אותו עם מגבון נוסף למשך 15 שניות

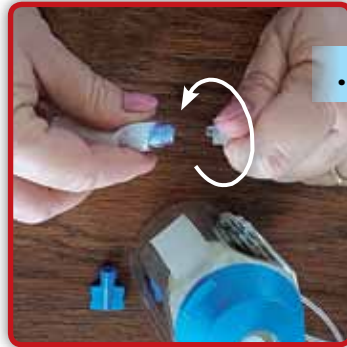


.2

אוחזים את פקק האל חזור באמצעות מגבון אלכוהול ומבריגים החוצה את קצה צינורית משאבת העירוני




.1

רוחצים ידיים במים ובסבון נוזלי וייבש במגבת נייר חד פעמית

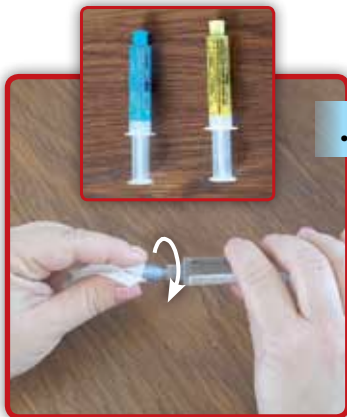

.6

אם קיימת הנחיית רופא למתן הפרין מוציאים אויר מהמזרק, בדומה לסעיף 4, מחברים את מזרק ההפרין אל פקק האל-חזור ע"י דחיפה והברגה לכיוון צד ימין. מזריקים _____ מ"ל (עפ"י המרשם הרפואי). בסיום ההזרקה, סוגרים את הסוגר שעל המאריך, במידה וקיים, ורק אח"כ מנתקים המזרק

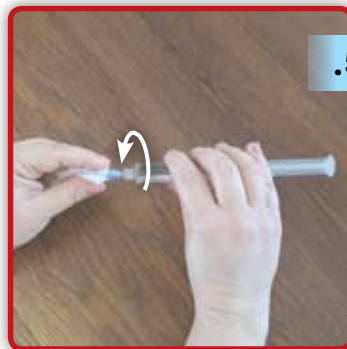

.5

מחברים את מזרק הסליין אל פקק האל חזור ע"י דחיפה והברגה לכיוון צד ימין. מזריקים _____ מ"ל (עפ"י המרשם הרפואי)



.4

1. אוחזים את מזרק הסליין באופן אנכי - פתח כלפי התקרה.
2. דוחסים את הבוכנה כלפי מעלה.
3. מסירים את הפקק.
4. דוחסים שוב את הבוכנה כלפי מעלה עד ליציאת הנוזל (טיפה)

זיהוי וטיפול בתקלות לפני חיבור משאבת העירוי התרופתי לצנתר

תקלה	סיבה אפשרית	סדר הפעולות הנדרשות
אם במשאבת העירוי החד פעמית מופיעים: דליפה, חוסר פקק, קרע של הבלון/ צינורית המשאבה וכדומה		1. אין להשתמש במשאבה. 2. הודע לנציג שירות לקוחות רמדיקס קאר. 3. השתמש במשאבת עירוי אחרת. בהיעדר משאבת עירוי נוספת, צור קשר מייד עם שירות הלקוחות.
התרופה שבמשאבה אינה זורמת	חסימה במעבר התמיסה	1. וודא שצינורית המשאבה לא מקופלת. 2. וודא שהסוגרים על צינורית המשאבה והצנתר פתוחים. 3. אם עדיין אין זרימה, פנה לשירות לקוחות רמדיקס קאר.
בעת שטיפת הצנתר עם הסליין התמיסה לא זורמת	חסימה בצנתר	1. אם קיים מאריך עם סוגר, וודא שהסוגר על הצנתר פתוח. 2. וודא שחיבור המזרק לפקק האל חזור תקין. 3. אם עדיין יש חסימה, הפסק את המשך הפעולות והודע לצוות המטפל במרפאה או לשירות לקוחות.

זיהוי וטיפול בתקלות אחרי חיבור משאבת העירוי התרופתי לצנתר

תקלה	סיבה אפשרית	סדר הפעולות הנדרשות
דליפת נוזל באזור החיבור לצנתר	חיבור לא תקין לצנתר	1. וודא הברגה נכונה של צינורית המשאבה אל פקק האל חזור. 2. אם הדליפה ממשיכה, הודע מיידית לשירות לקוחות.
התארכות זמן העירוי מעבר לזמן הנדרש	חסימה מלאה או חלקית בצנתר	1. וודא שצינורית המשאבה לא מקופלת. 2. וודא חיבורים תקינים. 3. וודא שהוצאת את משאבת התרופה מהמקרר בהתאם להוראות. תמיסה קרה מאטה את קצב ההתרוקנות. 4. הודע מיידית לנציג שירות לקוחות.
חום, פריחה, גרד, סחרחורת, הרגשה כללית רעה	תתכן תגובה לתרופה	1. הפסק את מתן התרופה. הודע מיידית לרופא המטפל ולשירות לקוחות.
אודם, הפרשה, כאב באזור הצנתר	זיהום מוצא הצנתר	2. הודע מיידית לרופא המטפל!



قسطار طرفي



Периферийный катетер



צנתר היקפי

המידע בעלון מוגש כשירות למטופל ולבני משפחתו. המידע אינו מהווה תחליף לייעוץ הרפואי המוסמך שניתן לך במחלקתך/מרפאתך

בכל שאלה ניתן לפנות לנציג/ת שירות לקוחות Remedix Care 1-800-600-700
בסופי שבוע ובחגים יש ללחוץ שלוחה 2

Remedixcare
BY SUPER-PHARM

רמדיקס קאר מרכז הכנות ורוקחיות, האורגים 8 אשדוד, 7760919
Remedix.Beity@remedix-care.co.il